



Milchprobeentnahme


Vorgehen

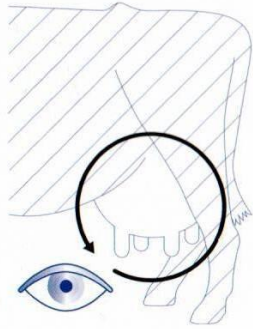


1. Sauberes Euter!

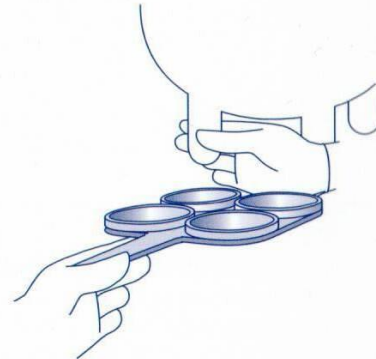

2. Sekret beurteilen und CMT durchführen.

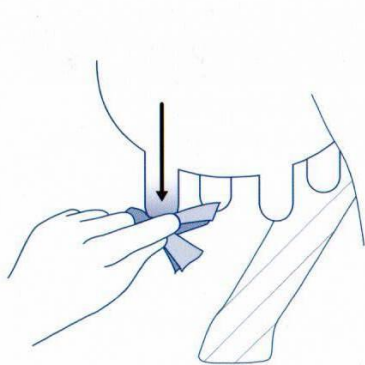


3. Zitzenkuppendesinfektion

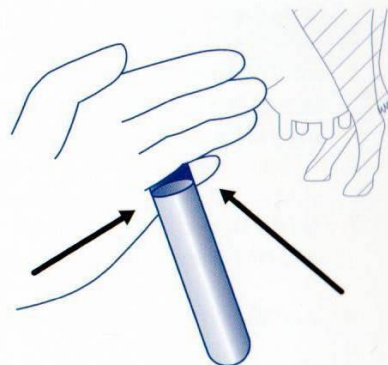


4. Das Milchröhrchen in der Hand zwischen Ringfinger und kleinem Finger fixieren.


Tierarztpraxis Wolfisberg
Sonneland 1
6206 Neuenkirch
Tel: 041'467'13'88

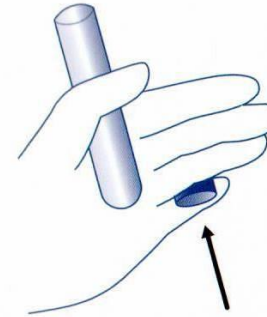


5. Den Deckel mit der Öffnung nach unten zwischen Ringfinger und kleinem Finger halten.

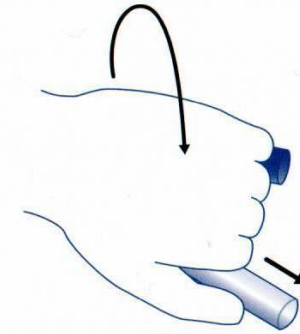

6. Die Hand nach unten drehen, so dass die Öffnung des Milchröhrchens geschützt ist. Das Röhrchen nach unten halten.

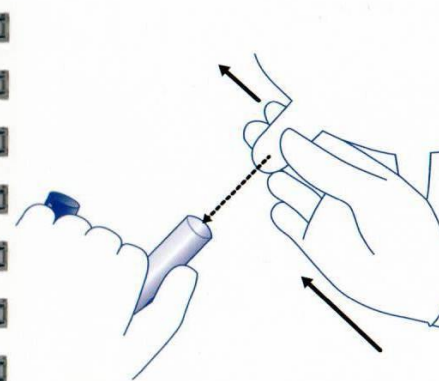

7. Die Zitze und das Milchröhrchen nach horizontal drehen und Milch anmelken.

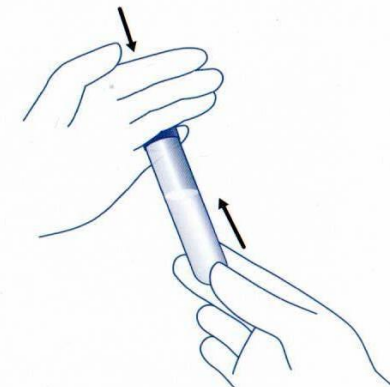

8. Das Milchröhrchen maximal 2/3 befüllen. Mit der anderen Hand das Röhrchen halten und den Deckel geschützt aufdrehen.

Die ersten 2-3 Milchstrahlen auf Boden abmelken !!!

Beschriftung Röhrchen: - Tierhalter
- Tiername / -nummer
- Viertelbezeichnung (VR/VL/HR/HL)